

INSTRUCTIES VOOR ZELFAFNEMERS

Correcte vulling citraatbuizen

Voorkom dat PT, APTT of D-dimeer niet kunnen worden gemeten.


Een juiste vulling van Greiner-citraatbuizen met blauwe dop is noodzakelijk voor betrouwbaar stollingsonderzoek. Controleer deze drie punten bij elke afname.

1. Vul tot de middelste pijlpunt


Laat de buis vullen tot de middelste punt van de pijl op het etiket. Controleer het bloedniveau na de afname.

Zo blijft de verhouding 1 deel citraat op 9 delen bloed correct. Een verkeerde verhouding kan tot onbetrouwbare uitslagen leiden.


Onder- of overvulde buis? Deze worden afgekeurd. Samen voorkomen we onnodige herafnames en zorgen we voor betrouwbare uitslagen.

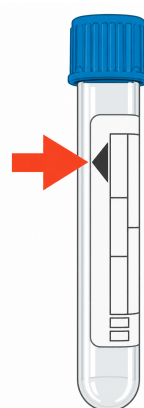

Vulmarkering

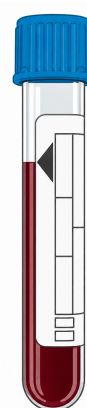

Correct gevuld

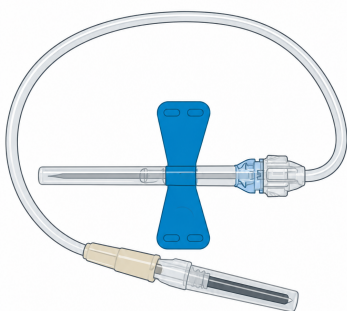

2. Gebruik een voorloopbuis bij een vlindernaald

Koppel eerst een voorloopbuis aan en daarna de citraatbuis. De voorloopbuis vult het slangetje met bloed.

Zonder voorloopbuis komt de lucht uit het slangetje in de citraatbuis, waardoor deze onvoldoende kan vullen.

3. Controleer de houdbaarheidsdatum

Controleer de voorraad regelmatig en gebruik geen verlopen buizen. Na de houdbaarheidsdatum kan het vacuüm afnemen, waardoor een buis mogelijk niet goed vult.

