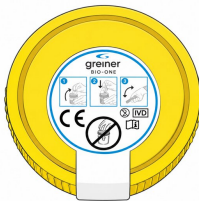
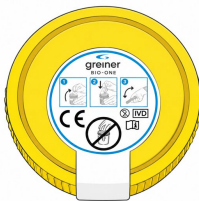


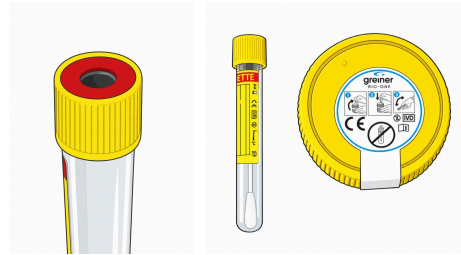
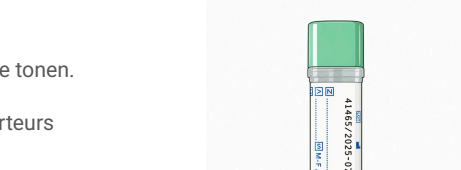
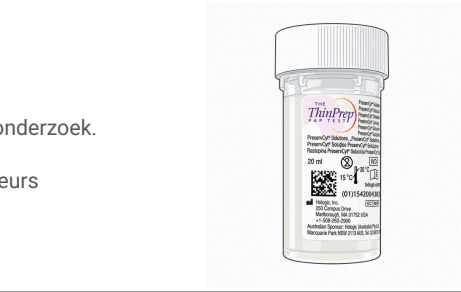
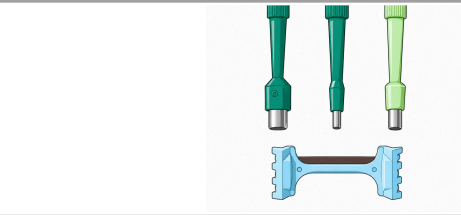
Medische Microbiologie

Altijd naam en geboortedatum op het afnamemateriaal vermelden!

<div><div>A</div><div>B</div></div>	<div><div><div>Urine-afnameset</div><div>Urine potje, buis geel/zwart dop</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Midstream urine</div><div>Kweek</div><div>Kamertemperatuur</div><div>Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div>C</div></div>	<div><div><div>Urine-afnameset</div><div>Urinepotje, buis wit/zwart dop</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>First stream urine (SOA) PCR</div><div>Koelkast</div><div>Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div>G</div><div>R</div></div>	<div><div><div>eSwab roze/blauw</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Uitstrijk algemeen (roze); uitstrijk nasofarynx of urethra (blauw)</div><div>Kweek en PCR</div><div>Koelkast</div><div>Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div><div><div>Let op!</div><div><div>• Swab afbreken op afbreekpunt en laat deze in de buis met vloeistof achter.</div><div>• Vermeld herkomst van het materiaal.</div></div></div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div>A</div></div>	<div><div><div>Dipslide</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Dipslide. NB: Bij verdenking urineweginfectie heeft een urinebuis met geel/zwarte dop de voorkeur.</div><div>Kamertemperatuur</div><div>Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.</div></div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div>D</div></div>	<div><div><div>Feces container</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Feces</div><div>Kweek, microscopie, antigeentest, PCR en calprotectine (klinische chemie)</div><div>Koelkast</div><div>Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div><div><div>Let op!</div><div>• Potje voor de helft vullen en goed dichtdraaien</div></div></div>	<div></div>	
<div><div>P</div></div>	<div><div><div>Steriele container</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Sputum, bal, pus, biopt, weefsel, wondvochten, semen, haren, nagels, huidschilfers</div><div>Kweek, microscopie en PCR</div><div>Koelkast</div><div>Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div><div><div>Let op!</div><div>Vermeld aard en herkomst van het materiaal.</div></div></div>	<div></div>	
<div><div>F</div></div>	<div><div><div>Plakbandpreparaat</div></div></div>	<div><div><div>Aard materiaal</div><div>Diagnostiek</div><div>Bewaarconditie na afname</div><div>Verzendinstructie</div></div><div><div>Perianale huid</div><div>Microscopie (<i>Enterobius vermicularis</i>)</div><div>Kamertemperatuur</div><div>Binnen 24 uur inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.</div></div><div><div>Let op!</div><div><div>'s Morgens afnemen voor het wassen volgens de afname instructie.</div><div>Plak het plakband vervolgens op een objectglaasje.</div><div>NB: Doorzichtig plakband gebruiken, dus geen scotch tape.</div></div></div></div>	<div></div>	

Overige (Klinische Chemie/ Pathologie)

Altijd naam en geboortedatum op het afnamemateriaal vermelden!

	Urine-afnameset Urine potje, buis geel/rode dop	
Aard materiaal Diagnostiek Bewaarconditie na afname Verzendinginstructie	Urine Urinescreening (stripanalyse) en dysmorfe erythrocyten en/of (cel) cilindres Koelkast Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.	
iFOBT Buis met groene dop	Diagnostiek Screeningstest om niet zichtbaar (occult) bloed in de ontlasting aan te tonen. Bewaarconditie na afname Verzendinginstructie	
ThinPrep Pap TEST Dunne laag potjes	Diagnostiek Voor het maken van cervixuitstrijken voor een medische indicatie. Voor moeilijk af te nemen uitstrijk kunt u een speciale endocervicale brush aanvragen. Dit materiaal is ook geschikt voor aanvullend HPV onderzoek. Bewaarconditie na afname Verzendinginstructie	
Biopsstans 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm en biopsy blades (mesje voor shave-biops)	Diagnostiek Voor het maken van huidbiopsen voor histologisch onderzoek.	
PA potje 10% formaline	Diagnostiek Voor het verzenden van materiaal van histologisch onderzoek. Bewaarconditie na afname Verzendinginstructie Let op!	
Semen container steriel	Diagnostiek Fertiliteitsonderzoek Bewaarconditie na afname Verzendinginstructie	

BESTELLEN MATERIALEN

(Gratis) materialen kunt u via onze website bestellen:
unilabs.nl/zorgverleners/materiaal-bestellen

CONTACT

U kunt 24 uur per dag contact opnemen met een van onze vakspecialisten: unilabs.nl/zorgverleners