

Handleiding: Nieuwe werkwijze voor zelfafnemende relaties

De zorg is in beweging en Unilabs beweegt mee. Daarom zullen wij de verwerking van uw laboratoriumaanvragen in de komende periode verplaatsen van Utrecht naar ons ultramoderne laboratorium in Amsterdam. Hiermee creëren wij een efficiënter en toekomstigbestendiger laboratorium waar wij u de service kunnen bieden die u nodig hebt. Bij deze verplaatsing horen een aantal wijzigingen.

Graag nemen wij u in onderstaande instructie mee wat deze wijzigingen voor u betekenen.

1. Buizen en etiketten



Zoals u momenteel gewend bent zullen de buizen van Greiner gebruikt worden. Echter, het formaat en soms ook de kleur van de buis zal veranderen.

- De lange buizen worden aangegeven als groot (G).
- De kleine buizen worden aangegeven als klein (k). De kleine buizen zijn de buizen die u al gewend bent.

U zult van ons een **startpakket** ontvangen waarin een geplastificeerd aanvraagformulier en een barcodetabel te vinden is. Op dit aanvraagformulier zijn de af te nemen buizen omgezet naar de juiste, nieuwe, kleur. Hier staan ook afkortingen achter. In de barcodetabel kunt u de betekenis van deze afkortingen vervolgens weer terugvinden. Zo kunt u controleren welke buizen er voor uw afname nodig zijn.

De **etiketten, ookwel pre-labelvel**, zullen ook wijzigen. Hiervan is een voorbeeld te vinden in [bijlage 1*](#). Deze wijziging van pre-labelvel zorgt ervoor dat er geen verloopdatum meer is op de stickers. Elke sticker is dus een uniek nummer.

Op het **aanvraagformulier** is aangegeven welk formaat buis geprikt moet worden, welke kleur buis dit is en de afkorting van de sticker die op de buis geplakt moet worden. Een aantal voorbeelden volgen op de komende pagina.

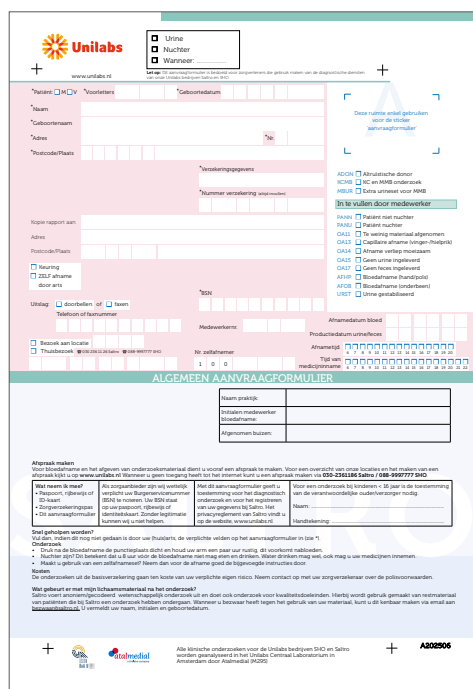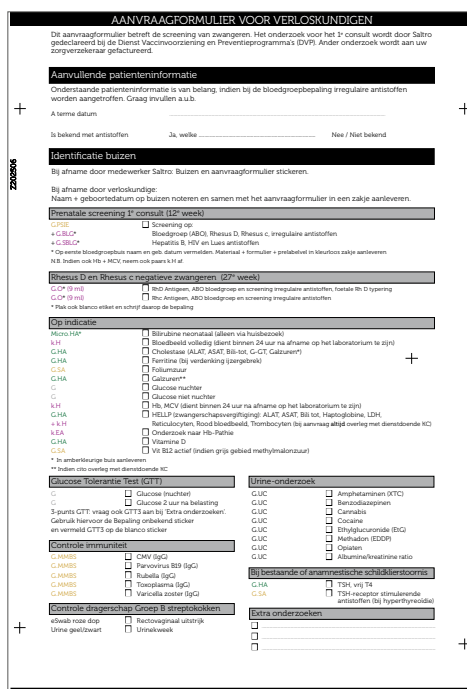Welke buis geprikt moet worden is te zien door de kleur waarin de bepaling staat weergegeven op het aanvraagformulier. De afkorting achter de bepaling geeft aan welke grootte van de buis geprikt moet worden en welke sticker op de buis geplakt moet worden. De stickers staan afgekort weergegeven in de rechtsingevogde barcodetabel.

Voorbeeld 1: **Calcium** **G.HA**

Het woord 'Calcium' is groen. Dit betekent dat er een groene buis geprikt moet worden. Dit is de lithium-heparine buis met gel. De 'G' in de afkorting G.HA staat voor een grote buis. 'HA' staat voor de sticker die op de buis geplakt moet worden: Heparine Algemeen (zie hiernaast).

Voorbeeld 2: **Bloedbeeld volledig** **k.H**

De woorden 'Bloedbeeld volledig' zijn paars. Dit betekent dat er een paarse buis geprikt moet worden. De 'k' in de afkorting k.H staat voor een kleine buis. 'H' staat voor de sticker 'Hematologie/BSE/HbA1c'.

Let op: er zijn 3 paarse buizen, 4 ml, 6 ml en 9 ml. Met een grote paarse buis wordt de 6 ml buis bedoeld. De 9 ml buis is enkel voor de 27-weekse screening van zwangeren.

Voor bepalingen die niet op het Algemeen Aanvraagformulier staan: zie **www.bepalingenklapper.nl**

Bepaling onbekend

Bij bepalingen waarbij het onduidelijk is welke sticker geplakt moet worden, kan de 'bepaling onbekend' sticker gebruikt worden. Plak dan graag ook het blanco etiket op de buis en schrijf daarop de bepaling én de naam en geboortedatum van de patiënt.



Naam en geboortedatum

Op het pre-labelvel zit onderaan een etiket voor de naam en geboortedatum van de patiënt. Deze dient ten alle tijden ingevuld te worden en blijft op het pre-labelvel.

Formulierstickers (FORM1 en FORM2)

Als u gebruik maakt van een papieren aanvraag of een zorgdomein op papier afneemt, dan kunt u graag de stickers FORM1 op de voorkant plakken en FORM2 op de achterkant plakken.

Barcodetabel	
Allergie	AL
Bepaling onbekend	O
Bicarbonaat/ Alcohol	BA
Bloedgroep	BLG
	SBLG
EDTA alg.	EA
Faeces alg.	FA
Geneesmiddel	ME
Glucose	G
Hematologie/BSE/HbA1c	H
Heparine algemeen	HA
MMB serum	MMBS
MMB urine	MMBU
MMB overige#1	MMBO1
MMB overige #2	MMBO2
PSIE	PSIE
Serum algemeen	SA
Spijtsrum	SPY
Stolling	ST
Urine scr/sed	UR
Urine chemie	UC
Vitamine B1-B6	VB16
Verzend serum	VS
Formulier voorkant	FORM1
Formulier achter of 2de	FORM2

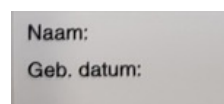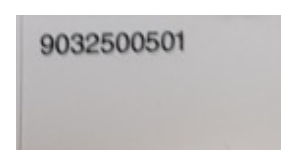

2. Volgorde van buizen

De volgorde van de buizen is aangegeven op de achterkant van het aanvraagformulier.
De gele buis is nieuw en ingevoegd.



3. Aandachtspunten

- De glucosebuis dient 10 maal gezwenkt te worden na afname. Alle andere buizen blijven op de huidige hoeveelheid van 6 maal zwenken.
- Bij het materiaal wordt een Amsterdam kaart (KC of MMB) toegevoegd in de transportzak
- Vitamine C kan niet meer worden aangevraagd en afgenomen.
- BNP wordt vervangen door NT-proBNP. Hiervoor is een gewone lithium-heparine buis met gel nodig (etiket Heparine algemeen). De buis kan in een rekje (blauwe zakje niet meer nodig).
- PTH moet worden afgenomen in een koude buis, direct na afname gecentrifugeerd worden in een gekoelde centrifuge, en het verkregen plasma moet direct worden ingevroren (zie ook de bepalingenklapper).
- Vanwege deze specifieke vereisten kan PTH alleen nog worden afgenomen op een beperkt aantal speciaal ingerichte afnamelocaties.
- Hepatitis C, gele buis met MMB serum-sticker gaat in een doorzichtig zakje.

4. Bepalingenklapper

Op het aanvraagformulier staan de meest gangbare aanvragen. Indien er een aanvraag niet op staat kunt u deze opzoeken in de bepalingenklapper www.bepalingenklapper.nl. Hier kunt u vinden welke buis u moet prikken, kies daarna de bij behorende sticker.

5. Inleveren materiaal

De volgende materialen worden in een zakje aangeleverd:

- Cito in een rood zakje → zie uitleg bij CITO.
- Blanco zakje → verloskundige screening 12 weken (PSIE op stickervel).
- Alle buizen gaan met formulier in een doorzichtig zakje. U hoeft hier niets op te plakken.
- Blanco zakje → hepatitis C, gele buis met MMB serum sticker.

6. Cito aanvragen

Citoaanvragen moeten altijd telefonisch aangevraagd worden op telefoonnummer: 088 700 1001, optie 1.

Het is van belang om bij deze aanvraag door te geven dat het om materiaal gaat wat naar het CLA (Centraal Laboratorium Amsterdam) moet.

Bij vragen, opmerkingen kunt u contact opnemen met:

1e contactpersoon: Desiree van Roon (trainster) - 06-110 39 300 (niet werkzaam op woensdag)

2e contactpersoon: Door Verkerk - 06-579 59 657

Bijlage 1: voorbeeld pre-labelvel

8492503511 FORM 1 	8492503511 FORM 2 	BLG GR.PAARS 849250351111 
HEMAT/BSE/HBA1C KL.PAARS 849250351101 	STOLLING BLAUW 849250351103 	Naam: Geb. datum:
HEPARINE ALG. GR.GROEN/GE 849250351104 	Bic/alc. KL.GROEN/GE 849250351125 	Spijt BLG GR.PAARS 849250351112 
GLUCOSE GRIJS 849250351105 	GTT5 GRIJS 849250351135 	PSIE GR.GEEL 849250351113 
SERUM ALG. GR.GEEL 849250351109 	ALLERGIE GR.GEEL 849250351121 	MMB SERUM GR.GEEL 849250351114 
VERZ SERUM GR.GEEL 849250351123 	SPIJT SERUM GR.GEEL 849250351124 	MMB URINE UR.KL.WIT 849250351115 
GENEESMIDDEL GR.ROOD/ZW 849250351127 	URINE CHEMIE UR.GR.WIT 849250351106 	MMB OVERIG #1 849250351116 
Vit B1/B6 GR.PAARS 849250351110 	URINE SCR/SED UR.GR.GEEL 849250351120 	MMB OVERIG #2 849250351117 
EDTA ALG. GR.PAARS 849250351119 	FAECES ALG. 849250351118 	BEP.ONBEKEND 849250351199 
Naam:		8492503511
Geb. datum:		